


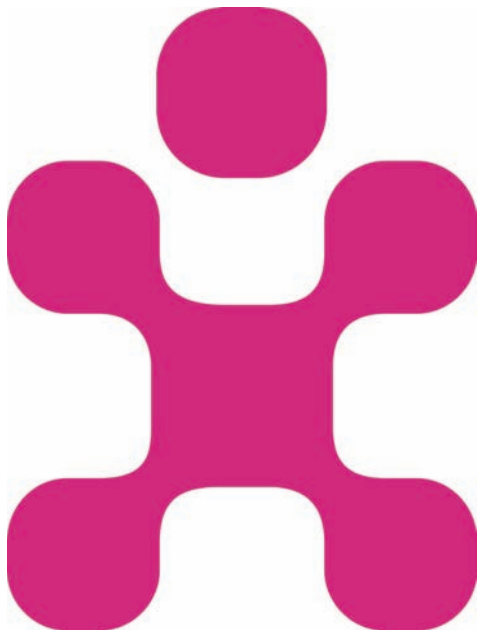

Technopole Bordeaux Montesquieu • Allée François Magendie
33650 Martillac • France

Phone : +33 (0)5 57 995 555 • Fax : +33 (0)5 57 995 700

marketing@implanet.com • www.implanet.com

Distribuido por:



Avda. Via Augusta, 15-25 • 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 557 10 22 • info@protectiontrauma.com • www.protectiontrauma.com



madison

Prótesis total de rodilla primaria

IMPLANTES

Componentes femorales :

- 8 tamaños (1 a 8)
- Cruzado post conservado o estabilización posterior
- No cementado (con recubrimiento de hidroxipatita)(HA) o cementado
- Tróclea anatómica

Componentes tibiales :

- 8 tamaños (1 a 8)
- Simétricos
- Fijos o móviles
- No cementados (con recubrimiento de HA) o cementados
- Diseño con quilla tibial Delta

Vástagos de extensión tibial :


- Diámetro de 9, 11 y 13 mm
- Longitud de 35, 55 y 95 mm

Insertos tibiales :

- 8 tamaños (1 a 8)
- Para cruzado posterior conservado (CR), congruente (UC) o con estabilización posterior (PS)
- Espesor de 10, 12 y 14 mm para CR
- Espesor de 10 a 20 mm para los insertos UC y PS (a incrementos de 2 mm)


Componentes patelares :

- 4 diámetros : 30, 33, 36 y 39 mm
- 2 espesores : 8 y 10 mm
- Para restauración de superficie y cementada con 3 fijaciones

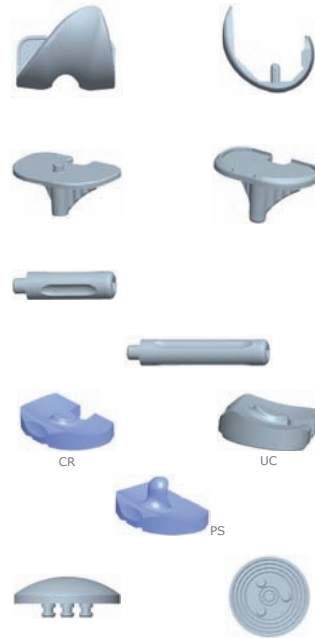


INSTRUMENTACIÓN


Corte Tibial

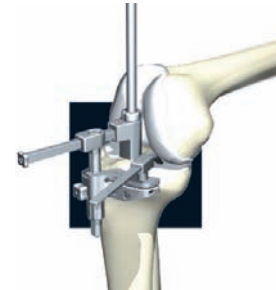

Corte femoral distal

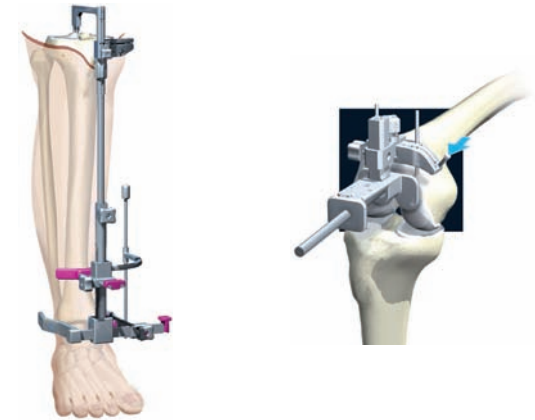

Rotación – Tamaño – 4 en 1 – Escotadura PS

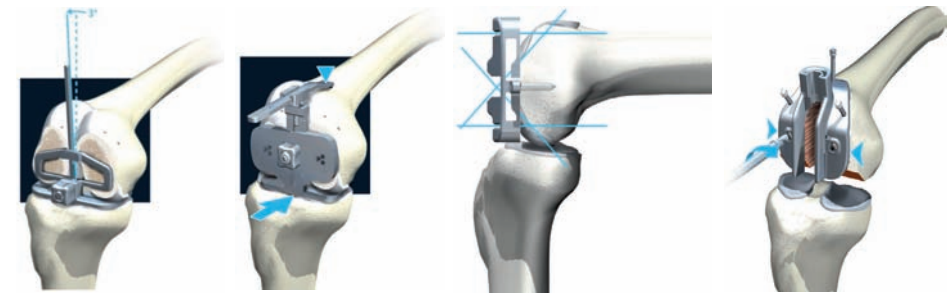

DISEÑO

Los implantes Madison están diseñados para la preservación del tejido óseo :

- Componente femoral de 8 mm de espesor,
- Diseño de tróclea delgada, sin protuberancia en la superficie interna anterior,
- Mínima resección de la escotadura para la PS,
- Diseño del platillo tibial en quilla acanalada y en forma de V que maximiza la superficie de contacto, sin macroestructura, fácil de extraer en caso de revisión.

Los implantes Madison están diseñados para seguir proporcionando resultados a largo plazo :

- Amplias superficies de contacto,
- Un único radio ML (medial-lateral),
- Estrictas pruebas mecánicas.

El instrumental Madison está diseñado para actuar con precisión :

- Medición AP y ML, junto con rotación externa, en un único instrumento,
- Verdadera rotación externa femoral,
- Escala incorporada para medir la línea de Whiteside,
- Diseño exclusivo para la opción extramedular tibial, validado con CAS,
- Ajuste micrométrico de la guía de corte tibial, disponible para las opciones de alineación extra e intramedular.

El instrumental Madison está diseñado para procedimientos mínimamente invasivos y estándar :

- Dimensiones del instrumental optimizadas,
- Guía de corte femoral distal-medial,
- Guías de corte tibial proximal-medial con protección para el tendón rotuliano.

Rótula

